

Kartlegging av skrantesjuka hos hjortevilt

Oppdagelsen av skrantesjuka hos hjortevilt i Norge har medført økt behov for kartlegging av sykdommen. Jegerer som jakter i innsamlingsområder bes sende inn prøver til CWD-testing som er ett vesentlig ledd for kartleggingen.

Innholdet i Jegerpakken

- ✓ Skje til hjerneprøven
- ✓ Prøveglass til hjerne + svelglimfeknuter
- ✓ Poser til avfall
- ✓ Hansker
- ✓ Merkelapp for hjortevilt
- ✓ Ferdig frankert lapp til konvolutt
- ✓ Lynlåspose til prøveglass

Merkelapper

Merkelappen for hjortevilt inneholder et sett klistremerker med identiske strekkodenumre. Numrene på lappen tilsvarer ID på det enkelte dyret du skal sende inn. Merkelappen med tilhørende klistrelapper skal kun benyttes til ett individ.

Den store klistrelappen skal fylles ut med navn, kommune, villreinområde (kun for villrein), art og telefonnummer. Skriv tydelig og med blokkbokstaver. Denne klistres på røret som inneholder hjerne og lymfeknuter.

Merkelapp for hjortevilt
Denne merkelappen brukes til jakt og fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein.

123456789123

Jakt
Fyll ut begge sider på merkelappen og registrer felte dyr på settskutt.no. Kommunen eller annet forvaltingsorgan orienterer om hva som samlers der du jakter, og hvor prøver kan leveres.

Slaktevekt er dyrets vekt uten skinn, innvoller, hode og fottar. Skuldekkadet kjøtt regnes med. Kjeven reinskjæres og tørkes, og skal ikke pakkes i plast. Kjeven skal fryses snarest.

Fallvilt
Ettersjaks-personell skal registrere dyret og strekkoden via Miljødirektoratet sin Fallviltapp, på Hjorteviltregisteret sine fallviltider, eller ved at eget feltskjema for fallvilt sendes kommunen. I påvente av svar på skrantesjuketest, bør dyret merkes med strekkoden.

Prøver
Alle prøver må merkes med strekkoden. Bruk bare én merkelapp per dyr. Prøvesvar og annen info finner du på hjorteviltregisteret.no. For tilbakemelding på CWD-prøve må strekkodennummeret være registrert sammen med dyret.

● Denne store delen festes til underkjeve/prøve

Alle prøver merkes med klistrelapp

Til hjerneprøve

123456789123

123456789123

123456789123

123456789123

Beholdes av innsender

123456789123

123456789123

Telefonnr.:

Navn: Jakt Fallvilt

Kommune:

Villreinområde:

Elg Hjort Rådyr Villrein

Felles mor-kalv par, noter mors strekkoden på kalvelappen

Ta vare på strekkoden! Du trenger dette nummeret for å kunne hente ut resultatet i hjorteviltregisteret når undersøkelsen er ferdig.

Fyll ut for jakt Kommune/villreinområde: _____

Valdnavn: _____ Valdnr: _____

Jaktfelt: _____ Jaktfellnr.: _____

Navn: _____ Tit.nr: _____

Fellingssted (vald/koordinater): _____

Fellingsdato: _____

Art: Elg Hjort Rådyr Villrein

Kjønn: Hann Hunn

Alder: Kalv 1,5 år 2,5 år og eldre

Vekt: _____ kg. Er slaktet nøyaktig veid? Ja Nei

Merknad: _____

Felt dyr nr.: _____

Gevittaker: høyre: _____ venstre: _____

Melk i juret: Ja Nei

Ant. kalver i følge med felt hunddyr: 0 1 2 3 Vet ikke

Felt kalv var ikke i følge med mordyr


Jeger/jaktregister felte dyr på appen Sett og skutt eller i Hjorteviltregisteret Fallvilt registreres på Fallviltapp. I Hjorteviltregisteret eller på eget feltskjema for fallvilt.

I områder med kjeveinnsamling skal hele merkelappen festes til kjeven og leveres sammen med denne. Husk å fylle ut all informasjon om dyret.

Hvilke dyr skal testes

Villrein: alle dyr 1 år og eldre

Elg/hjort: alle dyr 2 år og eldre

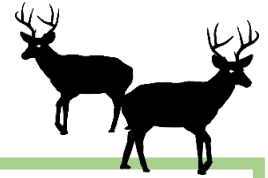

På neste side vil du også finne QR-koder. Om du laster ned en QR-leser på mobilen, vil disse kunne ta deg rett til instruksjonsvideoer for prøvetaking.

Slik tar du hjerneprøve

1. Merk prøveglasset med den ferdige utfylte informasjon og skru av lokket. Ta deretter på engangshansker.
2. Skill hodet til hjortedyret fra kroppen, kutt mellom kraniet og øverste nakkevirvel.
3. Legg hodet slik at kjeven til dyret vender opp, og åpningen til hjernen vender mot deg. Løsne rundt åpningen til hjernen med fingeren. Skjeen føres inn i åpningen til hjernen, helt til den butter (se figur neste side). Roter deretter skjeen fra side til side før du trekker skjeen sakte ut mens spissen på skjeen presses opp mot kjeven.
4. Legg prøven i prøveglasset uten å grise til utsiden av glasset.

Slik finner du svelglimfeknute

1. Legg det avkuttete hodet i samme posisjon som ved hjerneuttaket. Bruk engangshansker.
2. På hver side av luftrøret ligger de indre halspulsårene. Disse ligger over en muskel og sees tydeligst når luftrøret strekkes opp. På oversiden av denne muskelen og ganske nær svelget ligger også svelglimfeknutene.
3. Bruk fingrene for å kjenne etter lymfeknutene. De er harde runde kuler. Bruk en kniv og skjær løs to lymfeknuter.
4. Legg lymfeknutene i samme glasset som hjerneprøven
5. NB: om man ikke finner lymfeknutene, så skal du sende hjerneprøven likevel.

NB! Oppbevar prøvene kjølig frem til de sendes.

For å finne prøvesvaret ditt **MÅ** du registrere felte dyr i appen «Sett og skutt» eller via www.hjorteviltregisteret.no



Appen «Sett og skutt» finnes for andriod mobil og iPhone. Du kan også registrere felte dyr ved å logge inn som jeger på www.hjorteviltregisteret.no. Prøven må registreres for at laboratoriet skal få informasjon om prøven, og for at du skal finne resultatet ditt når analysen er ferdig. Prøveresultatet kan du søke opp på <http://www.hjorteviltregisteret.no/helse/sok>.

Mer informasjon:

www.hjortevilt.no/skrantesjuka



Veterinærinstituttet
Norwegian Veterinary Institute



SLIK GJØR DU DET



Fyll ut all informasjon på klistremerket «til hjerneprøve»
Skriv tydelig med blokkbokstaver

Jakt Fallvilt Telefon: _____
Navn: _____
Kommune: _____
Vilreinområde: _____
 Elg Hjort Rådyr Villrein

Til hjerneprøve

Fest den utfylte klistrelappen på prøveglasset



Sørg for at du fester klistrelappen denne veien



Usikker på prøvetaking?
Skann QR-kode for å se video




Lymfeknute



Hjerneprøve

Med kjeven vendt opp, føres skjeen inn denne veien:

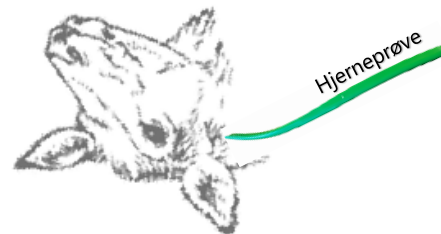

Hjerneprøve og lymfeknute bør se slik ut etter prøvetaking



Hjerneprøve



Lymfeknute

Samle begge prøvene i prøveglasset

Skru korken godt igjen, unngå blodsøl og tørk av røret



Legg prøveglasset i lynlåsposen og så i konvolutten, og merk med frankeringslapp



Ta vare på strekkodenummeret!

Lever og registrer konvolutten på postkontor så snart som mulig



VIKTIG

dyret må registreres i på appen Sett og skutt eller på www.hjorteviltregisteret.no



Takk for ditt bidrag

SKITT JAKT!

